


MEDIMAT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РУССКИЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- [1] Medimat
- [2] Сетевой адаптер
- [3] Сумка для транспортировки
- [4] Съемная смягчающая накладка
- [5] Инструкция

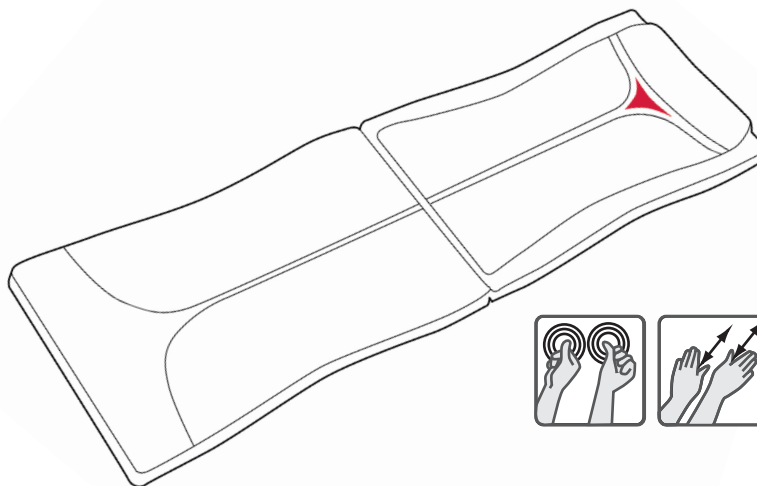

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осторожно отверните прилагаемым ключом-шестигранником винты на задней стенке массажера. Снимите защитный чехол и подсоедините штекер к адаптеру.

⚠ ВНИМАНИЕ! Винты обратно не вставлять.

До начала эксплуатации проверьте, соответствует ли сетевое напряжение напряжению, указанному на штепсельной вилке. Если да, то вставьте штепсельную вилку в розетку.

Установите MEDIMAT JADE на устойчивом основании (кровать / тахта / пол). Нагрузка от веса тела увеличивает интенсивность действия массажа. Ложитесь так, чтобы массажные головки были параллельны позвоночнику. Подголовники поддерживают голову в удобном положении. Можно выполнять вибрационный массаж также для верхней части туловища, если расположить подголовники на другой стороне и повернуться на 180°.


ПРИМЕНЕНИЕ

Вместо обычных массажных головок в аппарате MEDIMAT JADE применяются головки из нефрита. Прогрев повышает природную силу нефрита, интенсивность массажа увеличивается. Тепло медленно проникает сквозь камень, через несколько минут его уже ощущает тело. Уже на стадии нагрева вращающиеся движения массажных головок начинают расслаблять мышцы и снимают скованность и напряжение.

Регулярно пользуясь аппаратом MEDIMAT JADE, можно избежать многих повседневных жалоб. Заметно улучшается кровообращение и работа лимфатической системы благодаря лучшему распределению жидкости, содержащейся в организме, что поддерживает тонус мышц и обеспечивает жизненно важными питательными веществами мускулатуру, кости и кожу.

Дайте своему телу такой нужный и правильный отдых! Делайте для здоровья все хорошее и наслаждайтесь этим чувством!

УПРАВЛЕНИЕ

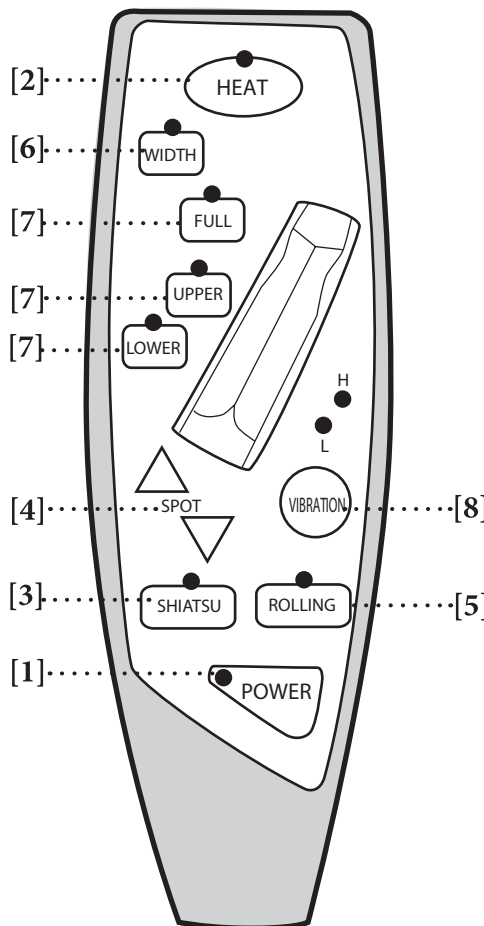

[1] POWER (Питание)

При нажатии этой кнопки начинается 15-минутный сеанс массажа. Чтобы закончить массаж раньше нажмите на кнопку еще раз – механизм автоматически переместится в нижнее исходное положение.

[2] HEAT (Нагрев)

При включенном массаже шиацу и при нажатии кнопки HEAT массажные головки нагреваются.

[3] SHIATSU (Шиациу)

Кнопка используется для включения и выключения этой техники массажа.

[4] SPOT (Местный)

Эта функция доступна только для режима массажа шиацу. Нажатием кнопок Spot up и Spot down можно перемещать массажные головки вверх и вниз. При повторном нажатии соответствующей кнопки механизм останавливается в необходимом месте.

[5] ROLLING (Роликовый)

С помощью этой кнопки включают восходящий и нисходящий роликовый массаж.

[6] WIDTH (Расстояние)

С помощью кнопки WIDTH во время роликового массажа изменяют расстояние между массажными головками (только в режиме роликового массажа).

[7] FULL / UPPER / LOWER (Полный / верхний / нижний)

Кнопкой FULL включается массаж всей области спины. При нажатии кнопки UPPER массаж ограничивается областью плеч и затылка. Кнопка LOWER включает массаж области спины и поясницы.

[8] VIBRATION (Вибрация)

Эта кнопка включает вибрационный массаж, при повторном нажатии включается одна из двух ступеней интенсивности. Различные частотные диапазоны оказывают и возбуждающее, и расслабляющее действие.

ХРАНЕНИЕ / УХОД

Регулярный уход продлит срок службы Вашего массажера Medimat! и будет гарантией безопасной эксплуатации на всем протяжении использования.

1. Рекомендованные условия хранения: сухое место, без пыли.

2. Избегайте попадания жидкостей на Medimat и воздействия открытого огня.

3. Очищайте массажер, используя сухую мягкую ткань.

4. Когда массажер Medimat не используется, всегда отключайте его от источника питания.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения надлежащего функционирования и оптимального эффекта просим Вас внимательно прочитать следующие инструкции перед применением данного оздоровительного оборудования. Просим Вас сохранить данную инструкцию для последующего использования!

• Данный массажер соответствует общепризнанным принципам технологии и действующим нормативам техники безопасности.

• Данное оборудование не требует технического обслуживания. Любой необходимый ремонт может быть выполнен авторизованным специалистом. Неправильное использование и несанкционированный ремонт запрещены по причинам безопасности и ведут к аннулированию гарантийных обязательств.

• Не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.

• Избегайте контакта оборудования с водой, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

• В случае неиспользования массажера в течение длительного периода убедитесь в его отключении от сети питания для предотвращения риска короткого замыкания.

• Не используйте поврежденные штепсельные вилки, шнуры питания или плохо закрепленные розетки. Поврежденные вилки или шнуры питания должны быть заменены производителем, представителем сервисной организации или квалифицированным персоналом. При неисправности немедленно отключите оборудование от сети питания. Мы не несем ответственности за повреждение по причине неправильного или ненадлежащего использования.

• Во избежание чрезмерной нагрузки на мышцы и нервные волокна не следует превышать рекомендованную продолжительность сеанса массажа в 30 минут.

• Не используйте заостренных или острых предметов.

• Любого массажа – в том числе и ручного – следует избегать во время беременности и/или при наличии одного или более противопоказаний в области массажа: головная боль, недавние травмы, тромботические заболевания, воспаления и опухоли любого типа, включая раковые. Рекомендуется посоветоваться со своим врачом перед лечением любых повреждений или заболеваний.

• Не используйте массажер во время управления автомобилем.

• Если Вы используете электрические аппараты, например, кардиостимулятор, то перед любым видом применения массажера Вам следует проконсультироваться со своим врачом.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Устранение |
|---|---|
| • Аппарат подключен к сети питания, но ни сам прибор, ни пульт дистанционного управления не работают. | • Проверьте присоединение к сетевому кабелю. • При очень долгом использовании аппарат может перегреться. Выключите его и дайте охладиться в течение 30-40 минут. |

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Соответствует директиве 2006/95/ЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 190 x 60 x 10 см

Вес: 12,5 кг.

Напряжение: AC 220В ~50 Гц, DC 24 В / 3А

Вход: переменный ток 100 -240 В ~ 50/60 Гц

Сертификаты:    

Генеральный импортер в России:

ООО «Альфа БС»

109518, Москва,
ул. Грайвороновская, д.4 стр.1

тел: (495) 229-45-32
факс: (495) 229-45-33

Эл. адрес: info@casada.ru
Адрес в интернете: www.casada.ru

Авторское право на изображение и тексты принадлежит «Casada International GmbH», они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.

Авторское право © 2012 г.
Casada International GmbH
Все права защищены.

